

AM-8000

Vadovas

 **Dignita®**

Įvadas


Šis įrenginys skirtas nustatyti alkoholio kiekį žmogaus iškvėptame ore. Šio prietaiso tikslumas nustatytas esant 0,5 ‰ ir 0,2 ‰ alkoholio koncentracijai kraujyje.

PASIRENGIMAS TIKSLIAM MATAVIMUI



- Bandymą galima atlikti tik po 15 minučių nuo alkoholio vartojimo.
- Prietaisą naudokite temperatūroje tik nuo +5°C iki +40°C.

MAITINIMO ŠALTINIS


- Patraukite šone įrenginio esantį dangtelį, kad atidarytumėte baterijų dangtelį.
- Įdėkite 9V bateriją ir įsitikinkite, kad simboliai „+“ ir „-“ yra teisingoje padėtyje.
- Jei baterija senka, prietaisas gali rodyti baterijos simbolį. Tokiu atveju pakeiskite bateriją. 
- Prietaisą taip pat galima naudoti su 12V įvestimi, pavyzdžiui, automobilio cigarečių žiebtuvėlio lizdo jungtimi.

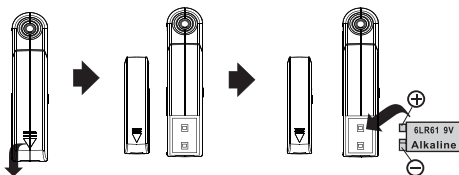

Dalių Pavadinimai

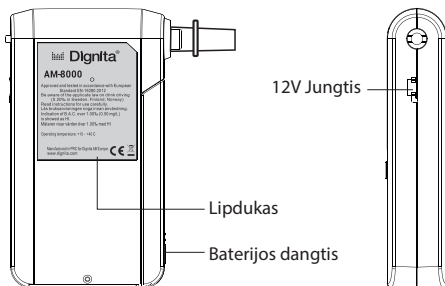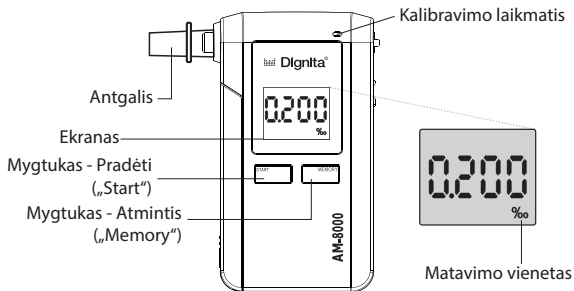


NURODYMAI

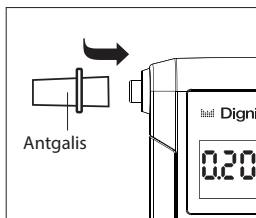

PRADINĖ POZICIJA

Pritvirtinkite antgalį.

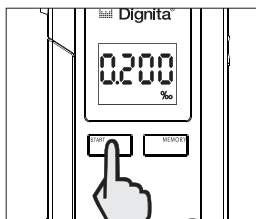

Paspauskite ir palaikykite „START“ mygtuką, kol įsijungs alkotesteris; atleiskite mygtuką.



Ekrane rodomos likusios dienos iki įrenginio kalibravimo. Alkotesterio LED lemputei degant raudonai - laikas kalibruoti įrenginį.



LCD ekranas pirma parodo dienų skaičių iki kalibravimo ir tada atliktų bandymų skaičių. Tolesnis veikimas - prasideda atgalinis skaičiavimas iki bandymo atlikimo.



Ekrane bus rodoma „WAIT“ (palaukite), o atgalinis laikas skaičiuojamas nuo 6 iki 0.



Pūsti

Garsas: **KLIK** Sustoti pūsti

Kol dega „CCCC“ ir „BLOW“, giliai įkvėpkite ir tolygiai pūskite į antgalį, kol pasigirs spragtelėjimas (garsas - **KLIK**).




Laukiant rezultato, ekrane rodoma „---“ ir „WAIT“ (laukti).



Bandymo rezultatas bus parodytas po 20 sekundžių.



Ekrane bus rodoma „Er-B“, jei pūtimas buvo atliktas netinkamai. Tada alkotesteris automatiškai išsijungia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, žr. skyrių - *Klaidos ir Problemos*.

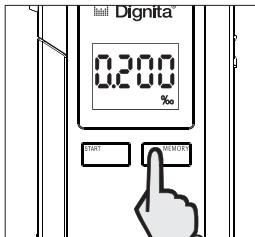

ATMINTIS

Kol rodomi rezultatai, galite paspausti mygtuką „Memory“, kad pamatytumėte penkių paskutinių bandymų rezultatus.

Alkotesteris automatiškai išsijungia po 20 sekundžių. Atminties mygtukas veikia tik baigus bandymą.

Turinys

Antgalis

Dėklas

Baterija

Naudotojo Instrukcija

SVARBIOS PASTABOS

- Po paskutinio alkoholio vartojimo prieš bandymą palaukite bent 15 minučių.
- Pūskite į kandiklį tolygiai, nenutrūkstamai, kol sustos skambėjimas ir pasigirs spragtelėjimas
- Ekrane gali pasirodyti klaida „Er-B“ (pūtimo klaida) - jei nepūtėte, nutraukėte pūtimą, nepūtėte pakankamai ilgai ar nepūtėte pakankamai stipriai.
- Alkotesterį naudokite tik +5°C iki +40°C temperatūroje.
- Prijungus įkrovimo laidą, baterija išjungiamą.
- Kalibravimą reikia atlikti kas 12 mėnesių (arba po 1000 bandymų), kitu atveju matavimo tikslumas laikui bėgant vis labiau mažėja.
- Nenaudojant įrenginio ilgą laiką, laikykite jį su išimtomis baterijomis.
- Niekada nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Saugokite prietaisą nuo smūgių ir skysčių.
- Panaudotas baterijas reikia išmesti specialiose surinkimo vietose, laikantis vietinių taisyklių.
- Įrenginys turėtų būti šalinamas pagal ES direktyvą 2002/96/EB ir nacionalinius įstatymus. Privatiems asmenims yra specialūs perdirbimo centrai.
- Alkotesteris parodo "HI", kai bandymo rodmuo viršija 1,00 ‰

Klaidos ir Problemos

Klaidos pranešimas arba problema	Sprendimas	Ekrano pranešimas
Ekranas neįsijungia	• Paspauskite ir palaikykite „Start“ mygtuką, kol įsijungs alkotesteris. • Patikrinti bateriją. • Jei prijungtas įkrovimo laidas, baterija išjungama.	
Automatinis išsijungimas	• Išsikrauna baterija. • Bandymas nebuvo atliktas laiku.	
HI	• Alkotesteris parodo "HI", kai bandymo rodmuo viršija 1,00 ‰	
Er-B	• Pūtimas buvo netolygus arba nutrauktas per anksti. • Pūtimas per silpnas. • Nebuvo aptiktas pūtimas. • Greitas temperatūros pokytis.	
	• Išsikrauna baterija. • Pakeisti bateriją į naują bateriją. • Naudokite šarmines baterijas.	
Signalų garsas	• Pūtimo režimas. • Klaidos pranešimas. • Viršija 0,2 ‰ lygį.	
Šviečia raudona LED lemputė (viršuje dešinėje)	• Atgalinis laikas iki kalibravimo pasiekė 0 dienų. • Deganti šviesa primena, jog alkotesteris turi būti sukalibruotas.	

Techninės specifikacijos

- Jutiklis - Elektrocheminis elementas
- Skaitmeninis 4 simbolių ekranas
- Pasiruošimo laikas: 10 sekundžių
- Pūtimo laikas: 6 sekundės
- Bandymo laikas: 10 sekundžių
- Oro pūtimo srautas: 10L/min.
- Sekantis bandymas: per mažiau nei 3 minutes
- Matavimo bandymo diapazonas: 0.08‰ – 1.00‰.
- Suapvalinimas iki 0,00 ‰, jei tai yra nurodytame diapazone
- Alkotesteris parodo "HI", kai viršijamas nurodytas diapazonas
- Alkotesteris skleidžia garsinį aliarmą, jei mėginys viršija 0,2 ‰
- Tikslumas: +/-0.05 ‰ at 0.5 ‰
- Atmintis: 5 bandymai
- Pridėti 2 kandikliai
- Maitinimo šaltinis su 9V arba 12V DC.
- Standartinė baterija yra tinkama maždaug 1000 bandymų.
- Baterijos išsikrovimo indikatorius, automatinis išsijungimas.
- Veikimo temperatūra: +5° C to +40° C.
- Laikymas: -10° C to + 60° C.
- Dydis: 117 x 65 x 23 mm.
- Kalibravimo intervalas: 12 mėnesių
- Kalibracijos laikmatis, dienų skaičiavimas iki kito kalibravimo
- Oro pūtimo srauto ir slėgio jutiklis

Garantija

Garantinis laikotarpis yra vieneri metai nuo pirkimo dienos. Garantija pratęsiama 12 mėnesių iki maksimalaus termino - 36 mėnesių nuo pirkimo dienos, jei Alkotesterį kalibruoja „ALTAS“.

Sąlygos

- Nėra sutinkami jokie reikalavimai dėl žalos atlyginimo, įskaitant ir pasekminę žalą.
- Įrenginio taisymas ar dalių keitimas garantinio laikotarpio nepratęsia.
- Ši garantija laikoma pažeista ir negaliojanti, jei įrenginį paveikė tam tikri pažeidimai ar remontas, kurį atliko neįgaliotas asmuo ar servisas.
- Garantija galioja tik pateikus pirkimo kvito originalą su data.
- Alkotesterio siuntimo išlaidos ir rizika - pirkėjo atsakomybė

Platintojas: _____

KITA INFORMACIJA

Su alkotesteriu visada elkitės atsargiai ir atsakingai. Tiesioginė saulės šviesa, karštis ir šaltis gali iškreipti matavimo tikslumo duomenis.

Alkotesteris nėra skirtas pakartotiniams matavimams su dideliu kiekiu alkoholio kraujyje. Tai gali sugadinti ir sutrumpinti jutiklio tarnavimo laiką. Po paskutinio alkoholio vartojimo turėtų praeiti mažiausiai 15 minučių. Alkoholio, kitų gėrimų (pvz., vaisių sulčių), burnos skalavimo skysčio, burnos purškalo, kai kurių vaistų ir kt. likučiai gali sukelti neteisingus matavimo rezultatus.

Kad būtų užtikrintas matavimo tikslumas, alkotesteris turėtų būti kalibruojamas bent kartą per metus (arba po 1000 bandymų). Alkotesteris turi būti sukalibruotas prieš atliekant 1200 bandymų - priešingu atveju alkotesteris bus užblokuotas ir juo nebebus galima naudotis.



www.altas.lt

